



Resca IPL Beauty Light

【レスカ IPL 光美容器】（ボディ用）
品番：CTR-820

家庭用

水洗いできません






取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。




目次	1
安全上の注意	2-3
安全上の注意 / 機能 (しくみ) について	4
各部名称と仕様	5
適合確認と本体操作方法	6
製品を使用する前のパッチテスト	7
各部位に使用する際の注意とご使用頻度	8
使用方法	9-10
お手入れのしかた	11
修理を依頼される前に	12-13
よくある質問	14
保証・修理と個人情報の取扱い	15
保証書・お問い合わせ先	16



ご使用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。







●本書では必ずお守りいただく事項を下記のように分類しています。




 危険	 警告	 注意
人が死亡したり重症を負う恐れが大きい内容です。	人が死亡したり重大な損害を受ける可能性がある内容です。	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容です。

●図記号の意味

 気をつけていただく必要がある内容を示します。	 行ってはいけない内容を示します。	 必ず行わなければならない内容を示します。
--	--	--

 危険	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●ベースメーカーなどの体内動脈型医用電子機器をお使いの方は、本体を医用電気機器に近づけない (事故や体調不良の原因) ●妊娠中・授乳中・生後および 15 才未満の方は使用しない (ワレモン®/フランスが不安定で肌トラブルの原因) ●入れ歯、アートメイク、美容整形をしている部分に照射しない (やけどによるクロイドや赤くなるなどの炎症の原因) ●発光面 / 照射口を直射しない。目に向けて照射を照射しない
禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●必ずコキ・ワダ・アシ・ビネコラインだけに使用する (やけどや赤くなるなどの炎症の原因) ●顔部、頰、乳首、VIOゾーンの肌質 (外傷部、小傷部、腫れ口) 部分や腫れ口は使用しない (痛みを感じたり、肌を傷つける原因) ●男性はひげや髪の毛に使用しない ●皮下注射を完結している部分には使用しない

 警告	
<p> 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 改造・修理はしない (火災・感電・けがの原因) ● あれた手で専用 AC アダプターをコンセントから抜き差ししない (感電やけがの原因) ● コードを傷めない ※彎つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、捻じる、重いものを載せる、踏み込むなど ● 専用 AC アダプターが腐んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しない (感電やショートによる火災の原因) ● 専用 AC アダプター以外は使用しない ● また、専用 AC アダプターを他の商品に使用しない (やけどやショートによる火災の原因) ● コンセントや延長コードの定格を超える使い方をしない (たとえ足踏などで、定格を超えると、発熱による火災の原因) ● 火中投入・封鎖しない ● 子供の手の届く場所に保管したり、使用させない (事故やけがの原因) ● 製品を燃焼するときは絶対に分解しない (火災ややけどの原因) ● 浴室や湿度の高い所に保管したり、水のかかりやすい所 (洗面台の上など) に置かない (感電や火災の原因) ● 水につけたり、水洗いしない ● 浴室や湿度の高い所で使用しない (感電やショートによる火災の原因) 	<p> 必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 必ず定格 100-240V で使用する ● 専用 AC アダプターや延長用プラグは、根元まで確実に差し込む (火災や感電の原因) ● 延長コードは、必ずスイッチを切り専用 AC アダプターをコンセントから抜く (感電やけがの原因) ● 延長プラグ・延長用プラグにはこりが付着しないように定期的に掃除する (電気などで接触不良になり、火災の原因) ● 専用 AC アダプターを抜き、乾いた布で拭いてください ● 異常・故障時には直ちに使用を中止し、スイッチを切り専用 AC アダプターを抜く (火災・感電・けがの原因) ● 異常・故障の例 <異常・故障の例> 本体、専用 AC アダプター、コードが ・変形したり異常に熱い ・こげ臭いにおいがある ・使用中に異常な音がある
 注意	
<p> 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 次のような方は使用しない <ul style="list-style-type: none"> - 皮膚知覚障害の方 - アトピー性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患のある方 - アレルギー体質の方、化粧品、衣類、金属などがぶれやすい体質の方 - 太陽光で肌が焼けやすい方 - 自分で感覚表示がでない方 ● 次のような部位には使用しない <ul style="list-style-type: none"> - 日焼けした肌 - ほくろなど暗褐色または黒色の肌部分 - 化粧品、傷、腫れ、あざ、いぼ、吹き出物、皮フがん、タムシ (丹毒)、そのうち、毛包炎、かぶれ、虫刺されなど - 血管腫 	<p> 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 次のような場合には使用しない <ul style="list-style-type: none"> - 体のすぐそばにいたり、肌・身体に異常を感じるとき ● 同じ場所に繰り返し照射しない (ムダ毛を目立たなくする効果が感じにくい場合でも、3日に1回を限度に使用する) (肌を傷つけたり、炎症、痛み、腫れなどのトラブルや悪化の原因) ● 延長プラグや延長用プラグにヒンヤリ感を付与させない (感電やショートによる火災の原因) ● 誤挿入でコードを専用 AC アダプターに巻きつけない (コードに異常な力がかり断線し、ショートによる火災などの原因) ● ぬれた肌には使用しない (感電の原因) ● 本体を濡らしたり、ぶつけたりしない (けがの原因) ● 光照射直後に発光面を熱めない (発光面は保護のため、やけどの原因) ● 衣服や髪の毛に照射しない (焦げたり、変色する原因)


 注意	
<p> 必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ご使用前に反射板や発光面の歪み・割れ・破損がないかを確認する (肌を傷つける原因) ● 足を露出されている方は皮膚科医に相談する (露出される薬によってはお肌が大変刺激になり、肌トラブルの原因) ● 肌に炎症 (赤くなるなど) が発生した場合は使用を中止し、2日たっても改善が早く場合には、皮膚科医に相談する (症状が悪化する原因) ● アクセサリーなどの金類類は必ずして使用する (事故やけがの原因) ● 専用 AC アダプターや延長用プラグを抜くときは、コードを握らずに必ず専用 AC アダプターや延長用プラグを持って抜く (感電やけがの原因) ● ご使用時以外は、専用 AC アダプターをコンセントから抜く (感電やショートによる感電や雷電火災の原因) 	<p> 必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> ● この装置の使用は室温 5℃～35℃の環境下で行う ● 換気口、排気口をふさがない (本体が過熱して故障の原因) ● 衛生上、この製品を他の人と共有しない ● ご使用する際は、必ず付属の保護用サングラスを着用する ● ご使用する際は、周囲にまきしない状態で使用する ● 暑いところでは使用しない (日に一時的な刺激を感じる原因) ● 照射する箇所は付属のカミソリやお手持ちの電気シェーバーなどで先に除毛する ● ご自身の肌タイプに合った照射レベル設定で使用する (それよりも高い照射レベル設定でご使用になると、肌トラブルのリスクが高まる原因)

機能 (しくみ) について

本製品は IPL (インテンス・パルス・ライト) によるムダ毛の処理をします。定期的に継続して使用することで、光エネルギーがムダ毛を徐々に目立たなくしてくれます。

※永久脱毛とは異なり、使用を中止するとムダ毛の量は徐々に元に戻ります。

各部名称と仕様

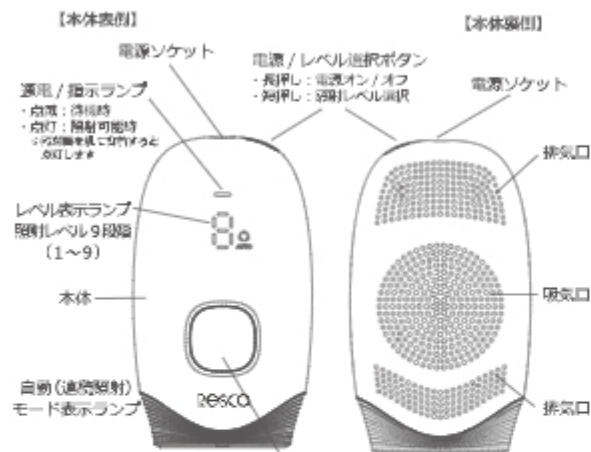

照射ボタン (単発照射 / 連発照射)
 ※短押し: 手動単発照射モードでは 1 回押しごとに単発で照射されます。
 ※長押し: 2 秒間を押しすると、自動 (連発照射) モードを開始します。照射ボタンを再度強く押し、または約 30 秒以上照射面を動かさないと自動 (連発照射) モードは停止します。
 ※電源を入れたまま放置すると約 5 分後に充電の電量が自動的に切れまします。



光線タイプ	IPL
電源方式	交流式 (専用 AC アダプター使用)
定格電圧	AC100-240V (50-60Hz)
消費電力	約 30W
定格入力	12V-2.5A
本体サイズ	H132 x W76 x D46 (mm)
使用環境	5℃~35℃
本体重量	183g (専用 AC アダプターを除く)
材質	本体 / ABS 樹脂 / PC / ガラス

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

適合確認と本体操作方法

肌色・毛色の適合確認

右図を参考に、肌や毛の色を比較し本製品との適合を確認してください。

肌色 \ 毛色	肌色					
	白色	薄緑色	薄茶色	茶色	濃茶色	黒茶色
白/灰色	×	×	×	×	×	×
赤色	×	×	×	×	×	×
薄金色	×	×	×	×	×	×
金色/薄茶色	○	○	○	○	○	×
茶色	○	○	○	○	○	×
濃茶色	○	○	○	○	○	×
黒色	○	○	○	○	○	×

○=使用可能 / ×=使用不可

- 肌の色が濃い方は光をより多く吸収するため、初めの設定からはじめることをおすすめします。
- 光は皮膚に熱さを感じることがありますが、痛みをとまらうものではございません。
- 照射時間や照射強度など、さまざまな理由により肌の反応が異なる場合がございます。

電源のオンとオフ

電源オン: 電源 / レベル選択ボタンを約 1 秒長押しします。
 電源オフ: 電源 / レベル選択ボタンを約 2 秒長押しします。

照射レベルの選択


電源がオンの状態で、電源 / レベル選択ボタンを押し照射レベルを選択。こちらの製品は専用光線管のため、照射光は適度な強度範囲に設定されており、9段階の照射レベルを選択いただけます。

- 電源を入れた初期状態では、レベル1が選択されます。
- 電源 / レベル選択ボタンを押すと「1~9」「9~1」の順に照射レベルが切り替わります。
- 選択した照射レベルは、レベル表示ランプ部分に表示されます。

照射モードの切り替え

電源がオンの状態で、照射ボタンを長押し (2秒以上) すると自動 (連発照射) モードに切り替わります。自動 (連発照射) モード選択中に照射ボタンを押すと終了します。
 ※電源を入れた初期状態では、手動単発照射モードが設定されます。

※照射レベルを上げてご使用の場合は、使用したい部位に 1 回照射し、2 日以上肌の根子を確認してから行ってください。照射レベルは 1 レベルずつ上げてください。

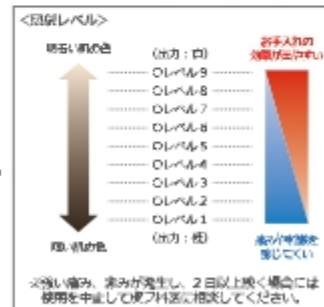

※強い痛み、赤みが発生し、2 日以上続く場合には使用を中止して皮膚科医に相談してください。

製品を使用する前のパッチテスト

- 本製品を初めてお使いになる際は、肌トラブル防止のため、必ず下記の手順でパッチテストを行ってください。

1：光美容器を使用する部位の近い場所を決める

- ※本体を扱いにくい場所や敏感な部分（足首や髯の部分）には使用しないでください。
※ご使用する部位の小さな範囲（約2×3cm：光照射約2回分の広さ）でテストしてみることをお勧めします。

2：付属の保護用サングラスを着用する

3：電源を入れ照射レベルを1に設定

- 電源/レベル選択ボタンを長押しして電源をONにします。
- 電源がONの状態でも電源/レベル選択ボタンを押し照射レベルを1に設定。
- 照射レベルが1になっているか、レベル表示ランプで確認してください。

4：本体をパッチテストする部分にあてる

- 照射面が皮膚に密着するように、本体を皮膚に垂直に当てます。

5：照射ボタンを押して一度だけ照射します

6：照射レベルを上げてご使用いただく場合、照射レベルを段階的に1ずつ上げてご自身で冷却し、上記3～5のパッチテストを行い、適正な照射レベルを確認します

7：2時間後の皮膚の状態を確認します

- 照射場所に異常（赤み、水ぶくれなど）がなければ、安心してご使用いただけます。

※強い痛み・赤みが発生したら肌を冷却・保冷し、強い痛み、赤みが2日以上続く場合には、使用を中止して皮膚科医に相談してください。



各部位に使用する際の注意とご使用頻度

1：ワキの脱毛

- ご使用前にワキについた制汗剤、香水、クリームなどの化粧品を良く拭きとってください。
- 皮膚がたるんでいる部分は、指で皮膚を伸ばして照射してください。
- 照射面が熱れる皮膚に、わずかの熱感を感じるのは正常です。

2：ビキニラインの脱毛

- ビキニラインは水着やショーツなどを着用し、あらかじめご使用する部分を確認してください。
- 毛を残したい部分があっても、必ずすべての毛を剃ってからご使用してください。
- 色素が蓄積するため、色の濃い部分には低い照射レベルの設定で照射してください。
- 慣れるまでは、照射レベル1でのご使用をおすすめいたします。
- 照射面が熱れる皮膚に、わずかなヒリヒリする感覚がありますが正常です。

3：手足の脱毛

- 骨や凹凸のある部分は他の部位に比べて痛みを感じやすくなります。

4：次のような部分には使用しないでください

- やけどの跡、色の濃い部分、目の周り、しもやけのある部分、ほくろ、眉毛、髪の毛、日焼けなどのある場所。
- 腹部、顔、乳房、VIOゾーンの粘膜（外陰部、小陰唇、腔口）部分や肛門には使用しないでください。
- ご使用中の日焼けを防ぐため、ご使用後の24時間は紫外線の当たる場所を避けてください。
- フラッシュを直視しないようご注意ください。

ご使用頻度



- 毛が濃い場合やムダ毛ケア（IPL）で効果が感じにくい場合は、3日に一度を限度にしてお試しください。
- ムダ毛を目立たなくする効果が感じにくい場合でも、同じ場所にくりかえし照射しないでください。
- しばらく使用しなかった場合は、最初の2ヶ月間と同じ使用頻度で再開してください。
- ご使用時間は、部位や毛の濃さ、使い方によって異なります。

使用方法

1：事前の除毛処理

- ご使用前に、付属のカミソリなどでご使用する部分の毛を剃り、きれいに拭いてください。
※脱毛効果を上げるため、毛根が光エネルギーを最大量に吸収できるようにしてください。
- ※蒸肌で使用してください。ローションやシェービング剤（ジェルなど）が肌に付着している場合は水でしっかり洗い流し、肌を乾燥してください。



2：本体電源の準備

- 専用 AC アダプターの器具用プラグを本体上部の電源ソケットに差し込んでください。
- コンセントに専用 AC アダプターをしっかりと差し込んでください。
- 待機状態で通電 / 指示ランプが点滅します。



3：サングラスの着用

- 付属の保護用サングラスを着用してください。
- ※器具の光による目の損傷を軽減するため必ず着用してください。



4：本体電源を入れ照射レベルを選択

- 電源 / レベル選択ボタンを長押し（約 2 秒）して電源をオンにしてください。
- 内部ファンが作動し、ファンの回転音がします。
- 電源を入れた初期状態では、レベル 1 が選択されます。
- 電源 / レベル選択ボタンを押して照射レベルを選択してください。
- ※赤前のタッチテストで確認ができていない正しい照射レベル内で必ず設定してください。



使用方法


5：照射モードの選択

- 照射ボタンを長押し（2 秒以上）すると自動（連続照射）モードに切り替わります。
- ※電源を入れた初期状態では、単発照射モードが設定されます。
- ※照射ボタンを再度短く押したり、肌から約 30 秒以上離すと自動（連続照射）モードは停止します。

単発照射モード	照射ボタンを 1 回押すと一度発光します。移動しながら前面照射ボタンを押して使用します。
自動（連続照射）モード	照射面が肌に密着すると光が一定間隔（約 2～3 秒）で自動的に照射され続けます。照射ボタンを押すとモードが終了します。

6：照射

- 本体の照射面が皮膚に垂直になるように当てます。
- 皮膚に密着していると通電 / 指示ランプが点灯します。
- 通電 / 指示ランプが点灯している状態で照射ボタンを押すと発光面 / 照射口が発光します。
※自動（連続照射）モードを選択している場合は、肌に密着した際に自動的に発光します。
- 一度照射したら、次の場所にスライドさせて照射をしてください。
- ※皮膚の腫瘍や火傷の恐れがありますので、同じ場所に連続して照射しないでください。
- ※常に照射面を肌に当てた状態を保つようにスライドしてください。

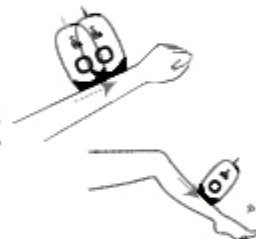

7：電源オフ

- 照射が完了したら、電源 / 照射レベル設定ボタンを長押し（2 秒以上）して電源を切ります。
- 乾いた布で照射面などをやさしく拭いてください。
- 本体と専用 AC アダプターなどを箱に戻し、子供の手の届かない場所で保管してください。
- 電源を入れたまま放置すると約 5 分後に製品の電源が自動的に切れます。



8：お肌のケア

- 照射後の皮膚は、氷水で冷やしたタオルなどでクールダウンすることをおすすめします。
- クールダウン後は、化粧水などで十分に肌を保湿することをおすすめします。

お手入れのしかた



- 製品性能を保つため、使用後は毎回お手入れをしてください。
- 汚れが付着した状態で使用すると、製品本来の機能が低下する原因となります。
- 薬品等を使って清掃しないでください。

1：電源プラグをコンセントから抜いて必ず電源がオフになっていることを確認してから本体のお手入れをしてください。水洗いはできません。

- 使用後、冷めるまでは照射口を触ったり、拭き取ったりしないでください。



2：発光面 / 照射口や吸排気口のほこりなどは少量の水で濡らした布をよくしぼり、綺麗に拭き取ってください。水拭きしたあとは、必ず乾いた布で水分を完全に拭き取ってください。

- シンナー・ベンジン・除光剤・灯油などの溶剤や薬品類、歯粉や洗剤で拭かないでください。本体の割れ・変色・腐食などの原因になります。
- 汚れが落ちにくい場合は高濃度アルコール（96%以上）を数滴含ませた布で印位を掃除してください。



※清潔な柔らかい布で製品の外部を掃除にします。

3：高温多湿、直射日光のあたる場所を避け、風通しの良い清潔な場所で乾燥させてください。

- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。ほこりがたまるないように、箱に入れて保管してください。
- この製品は一般のゴミとして廃棄しないでください。回収方法は各自治体で異なりますのでご確認をお願いします。

修理を依頼される前に

症状	考えられる原因	処置方法
通電/指示ランプが点灯しない 電源ボタンを押しても作動しない	各プラグが正しく接続されていない	各接続部を再度確認してください。
	コンセントに電源プラグがきちんと差し込まれていない	コンセントに専用 AC アダプターの電源プラグ部がきちんと差し込まれているか確認してください。
	定格電圧が対応していない	電源タップをご使用の場合は別のコンセント（家庭用 100V）から直接給電をお試しください。
照射口を肌に当てても、通電/指示ランプが点灯しない	コンセントに電源プラグがきちんと差し込まれていない	コンセントに専用 AC アダプターの電源プラグ部がきちんと差し込まれているか確認してください。
	しっかり肌に当てられない	発光面/照射口が肌にしっかりと当たっていることを確認してください。
発光しない	本体が高温になっている	本製品が自然に冷めるのを待ってからご使用ください。
	照射面が皮膚に密着していない	発光面/照射口を肌に密着させてください。
レベル表示ランプが点灯しない	電源/レベル選択ボタンが押されていない コンセントに電源プラグがきちんと差し込まれていない	コンセントに専用 AC アダプターの電源プラグ部がきちんと差し込まれているか確認してください。
照射の際に異音が出る	照射部位に髪の毛が残っている	本製品を使用する前に照射部位の髪の毛をしっかり剃ってください。
	発光面/照射口が汚れている	照射口をきれいにしてください。
	本製品の使用に当たっていない	操作方法、適用範囲について「使用可能部位と禁止部位」をご確認ください。禁止事項や可能部位などの詳細をご説明しています。
	発光面/照射口が破損している	ご使用を中止し、販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

修理を依頼される前に

症状	考えられる原因	処置方法
本体が 高温になる	連続使用可能時間を越えている	電源を切って本製品の使用を直ちに中止してください。
	使用レベルが高すぎる	照射を低レベルに調整してご使用ください。
通気ファンが 回らない	ファンの回転速度が遅く羽根が 回らない	本製品を再起動して使用してください。再起動しても改善しない場合は ご使用を中止し販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。
電源が 入らない	電源が繋がらない	コンセントに専用 AC アダプターの電源プラグ部がきちんと差し込まれている か確認してください。
	本製品が故障している可能性	ご使用を中止し、販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。
効果が 感じられない	肌状況に合わせた照射レベルを 選んでいない	肌状況に合わせた正しい照射レベルを選んで使用してください。
	照射時間、照射範囲、使用時間が 肌状況に対し適正でない	「使用可能部位と禁止部位」、「使用方法」に基づき肌状況に合わせた使用方法で ご使用ください。 毛質や肌の色、毛量などにより効果が変わる可能性があります。

よくある質問

質問	回答
肌や皮膚が赤くなるのですが	体質や体調によっては、光美容器を使うことで肌が一時的に赤くなったり痛みが生じることがあります。直ちに使用を中止し、肌を冷却・保湿してください。2日以内に症状が治まる場合は、 症状が出ない照射レベルでご使用ください。2日以上たっても症状が続く場合は、皮膚科医に 相談してください。何かご不明点がある場合はサポートセンターにご連絡ください。
毎日使えますか？	ご使用する部位やご使用期間により、ご使用頻度が異なります。 P8「ご使用頻度」に記載の使用頻度を守って使用してください。
使用中、 光が熱く感じるのですが？	感じ方には個人差がありますが、除毛が不十分な場合は熱く感じやすくなります。
メイクをした状態で 使用できますか？	使用できません。素肌で使用してください。
フラッシュがまぶしいのですが？	発光面 / 照射口が肌から浮かないように、しっかり密着させてください。 照射時は目を閉じたり、保護用サングラスを使用してください。
照射ランプは交換できるのですか？	照射ランプの交換はできません。
男性も使用できるのですか？	男性もご使用いただけますが、一般に男性は女性に比べ体毛が太く毛量も多いため、 肌への刺激が強くなることがあります。
照射がゆっくりになるのですが？	本体が過熱に熱くなるのを防ぐため、照射のスピードが遅くなっています。 本体を冷ますことで、通常のスピードに戻ります。
壊れたり、ひび割れたりしている	照射口部、電源コード、専用 AC アダプター等に損傷が見られる場合にはすぐに使用を中止して ください。安全上の懸念が感じられる場合、故障の懸念がある場合はすぐに使用を中止してください。

www.cattre.co.jp

<ネット接続がない場合は、右記までご連絡ください。> ▶▶▶

カトレ株式会社 サポートセンター

〒140-0015 東京都葛飾区大井町6-13-3 東二宮ビル5F

受付時間 土・日・祝祭日は別の日へ変更
11:00~12:00 / 13:00~17:00
TEL: 03-6421-0388 / info@cattre.co.jp

製品の搬入について | 本製品を搬入される場合は、自治体の分別ルールに従って搬入してください。

保証・修理と個人情報取扱

保証規定

- 保証期間内に本説明書、本体貼付けラベル等に従い正しくお使いいただいたにもかかわらず、故障した場合はお買い上げいただいた日本国内でのみ本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。
但し、消耗品及び付属品は除きます。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証期間内でも次の場合は有料修理、もしくは修理不可となります。
 - 本保証書の封入がない場合、及び所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名/販売日の記載がない場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - 使用上の誤り及び不当な分解、修理、改造による故障及び損傷。
 - 指定外の使用、保管、電源（電圧、周波数など）による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。
 - ご使用による汚れ、故障及び損傷。
 - カミソリを含めて付属品が損傷している場合。
 - 修理対象商品の送料等はお客様の負担となります。
- 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上ご依頼ください。
- 本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。

免責事項と限定保証

- 本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
- カミソリを含めて付属品等は消耗品の為、保証対象外となります。
- 本保証は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取り扱い

- お客様の個人情報は弊社商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業に利用いたします。
- 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
 - 弊社商品の発送等に必要個人情報。
 - 法令に基づく場合。
 - 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

保証書

保証期間 お買い上げ年月日より1年間 特込

お買い上げ日: 年 月 日

製品名: レスカ IPL光美容器 CTR-B20

お客様氏名:

ご住所: 〒

電話番号:

販売店名・取扱い店印

修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または
購入明細を用意いただき、ご購入いただいた販売店までご連絡ください。

発売元

カトレ株式会社
〒100-0011 東京都千代田区千代田1-3-1 幸ビル9F
TEL:03-4405-0090

サポートセンター
〒140-0013 東京都品川区南大井6-13-3 第二新開発ビル3F
TEL:03-6423-0888