

**目次**

- 目次 . . . . . 1
- 安全上の注意 . . . . . 2.3
- 安全上の注意・定期点検のお願い . . . . . 4
- 各部名称・仕様 . . . . . 5
- 機能に関して . . . . . 6
- 正しい使い方 . . . . . 7~9
- お手入れと保管・メモ . . . . . 10
- 保証・修理と個人情報の取扱い . . . . . 11
- 保証書・お問い合わせ先 . . . . . 12

**安全上の注意**

●ご利用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。

**危険**  
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。

**警告**  
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷、重大な損害を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意**  
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。  
※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

**禁止**  
禁止の行為であることを示します。

**必須**  
行為を強制・指示する内容を示します。

**危険**  
下記の電子機器との併用は絶対にしないでください。  
●ペースメーカーなどの体内植入型医用電子機器。  
●人工肺などの生命維持用医用電子機器。  
●心電計等の装置型医用電子機器。  
●その他の治療器具との同時使用はしないでください。誤作動をまねく恐れがあります。  
本製品は充電式電池を内蔵しています。  
●火中へ投入や加熱はしないでください。  
●高温下での充電・使用・放置をしないでください。

**警告**

下記のような方は絶対に使用しないでください。  
●医師の治療を受けている方  
●アトピー性皮膚炎の方  
●アレルギー体質・金属アレルギー・特に肌に敏感な方  
●強度近視（-6D以上）の方  
●目、顔、頭の手術を受けた方  
●心臓に障害のある方  
●急性（疼痛性）疾患のある方  
●悪性腫瘍のある方 ●成長過程の方  
●顔面神経痛の方 ●皮膚病の方  
●妊娠中、授乳中の方 ●生理中の方  
●他の美容機器や電気製品と同時に使用しない。  
●他の美容機器や電気製品と同時に使用しない。  
●ペットや動物に使用しない。  
●家族や他人と共有して使用しない。  
●洗顔料などがついたまま放置しない。  
●スクラブやピーリング作用のある洗顔料を使用しない。  
●本体や付属品をアルカリ洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン除光液などの溶剤で拭かない。  
●本体を水中に落とさない。水の中につけない。  
●本製品はIPX5の防水仕様です。完全防水ではありません。水中に沈めたり、強い水流や3分以上の流水をあてない。  
※付属品やUCB ACアダプターは防水ではありません。

**必須**  
●使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。  
●初回使用の時と慣れるまでは、必ず弱レベルから使用する。  
●使用部位は常に多めの水分を保ちながら使用する。  
●通電を阻害するオイルや油性の成分を併用しない。  
●力を入れて頭皮や肌にごすりつけない。  
●使用後は、お手入れのしかたに従い清潔を保つ。

**必須**  
●ピアスやアクセサリー類を外してから使用する。  
●異常、故障時には直ちに使用を中止し、電源アダプターを抜く。  
●USB ACアダプターやUSB ケーブルに破損、差込がゆるくないか確認する。

**注意**  
●落としたりぶつけない、不安定な場所に置かない。  
●直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。  
●ヘッド部を金属にあてない。  
●他の美容機器や電気製品と同時に使用しない。  
●ペットや動物に使用しない。  
●家族や他人と共有して使用しない。  
●洗顔料などがついたまま放置しない。  
●スクラブやピーリング作用のある洗顔料を使用しない。  
●本体や付属品をアルカリ洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン除光液などの溶剤で拭かない。  
●本体を水中に落とさない。水の中につけない。  
●本製品はIPX5の防水仕様です。完全防水ではありません。水中に沈めたり、強い水流や3分以上の流水をあてない。  
※付属品やUCB ACアダプターは防水ではありません。

**必須**  
●使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。  
●初回使用の時と慣れるまでは、必ず弱レベルから使用する。  
●使用部位は常に多めの水分を保ちながら使用する。  
●通電を阻害するオイルや油性の成分を併用しない。  
●力を入れて頭皮や肌にごすりつけない。  
●使用後は、お手入れのしかたに従い清潔を保つ。


**定期点検のお願い**

製品寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期点検をお願いします。

**愛情点検**  
こんな症状  
・製品が異常に発熱。  
・使用中の異常音や振動。  
・変形や異臭がする。

ご使用中  
故障や事故防止のため直ちに使用を中止して販売店に点検・修理をご相談ください。

**各部名称と仕様**

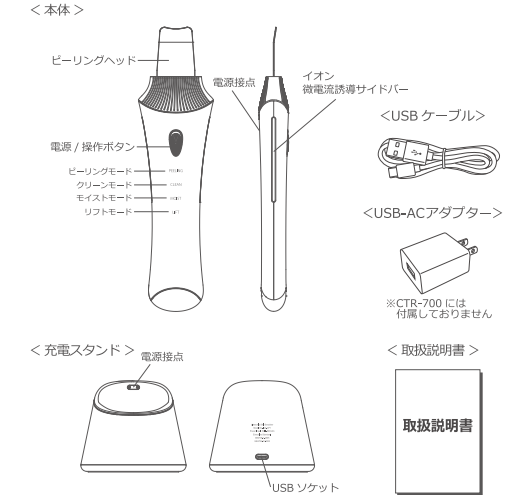


**仕様**

製品名	レスカウォーターピーリング美顔器		
型番	CTR-700 / CTR-701		
電源	AC100~240V 50/60Hz		
本体サイズ	約H195×W50×D22mm <table border="1"><tr><td>本体重量</td><td>本体 約85g</td></tr></table>	本体重量	本体 約85g
本体重量	本体 約85g		
使用電池	リチウムイオン電池 3.7V 600mAh		
充電時間	120分 (約90分稼働)		
材質	ABS樹脂、ステンレス		
消費電力	2.5W		
製造国	中国		

※製品改良の為、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

**機能に関して**

- ピーリングモード（超音波）**  
約 27KHz の超音波振動でお肌についている水分をミスト状にし、毛穴の奥の汚れや皮脂、黒ずみや古い角質などを吹き飛ばしながら除去・洗浄します。
- クリーンモード（イオン導出）**  
マイナスに帯電した汚れにプラスの微電流を流すことで、毛穴に詰まった汚れや黒ずみを吸着。
- モイストモード（イオン導入）**  
超音波とマイナスイオンで美容液の有効成分をお肌の角質層まで浸透させます。
- リフトモード（パッティング）**  
超音波振動と EMS 微電流で表情筋を鍛えて、お肌の引き締めケアします。

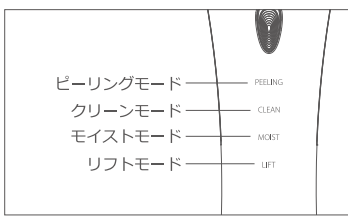

**正しい使い方**

- <ご利用前>**
- 充電**  
●本体と充電スタンドの電源接点があうようにスタンドにセットし充電を行う  
※本体と充電スタンドは接触充電となり、充電スタンドは USB Type-C ケーブルで電源に接続されます。  
※フル充電には約 120 分かかります。(稼働時間は約 90 分)  
※充電中は全てのモードライトが点滅し満充電になると点灯します。  
※バッテリー残量が少なくなると、ライトが速く点滅し、短い速いピーブ音が鳴り、製品は自動的にシャットダウンします。

- <お手入れをはじめ>**
- 洗顔**  
●メイクを落して通常洗顔して、水気をしっかりと拭き取ってください。  
●顔全体に水または拭き取り化粧水を塗布してください。  
※乾いた肌への使用は絶対にしないでください。
  - ピーリングとクレンジング**  
●電源 / 操作ボタンを長押しするとピーブ音が 2 回鳴り電源がオンになります。  
※電源がオンになった際はピーリングモードから始まります。  
●電源 / 操作ボタンを短く押ししてお好みのモードを選択。  
※モード選択の際はピーという音が鳴りモードが切り替わります。  
【ピーリング】→【クリーン】→【モイスト】→【リフト】  
の 4 つのモードが循環します。

**ケアを行う前に**

●超音波発生の確認を行います。十分に濡らしたお肌に、ピーリングヘッドを軽く当ててゆっくと滑らせます。ピーリングヘッドの先端からミストが出たら、超音波が発生しています。ミストが少ない場合は、水を多めに付けてください。  
※お部屋の明るさや背景の色の影響で、ミストが見えにくい場合があります。

**正しい使い方**

- イオン誘導サイドバーを握って、ピーリングヘッドをお肌に軽く押し当てて、ゆっくと顔全体に滑らせます。**  
※ピーリングヘッドは同じ箇所にもめず、移動させてご利用ください。
- 各モードは、5分間使用すると自動的に電源がオフになります。**  
※途中で電源をオフにする場合は電源 / 操作ボタンを長押しします。
- ご利用後は本体とピーリングヘッドについた水や汚れを絞った布やティッシュで拭き取ってください。**


- <フェイスラインのお手入れ>**  
顔の中心から外側に向かって滑らせます  
①あごから耳の手前まで  
②口元からこめかみまで  
③鼻側面からこめかみまで  
④頬の上から髪の生え際まで
- <鼻周りのお手入れ>**  
①鼻の横から中央まで、鼻の形に添うようにして動かします  
②鼻の先端から上に向かって滑らせます  
③①と②を1セットにして左右交互に2~3分行います。

**<口周りのお手入れ>**



**正しい使い方**

- <各モード>**
- 【ピーリングモード】(図①)**  
ピーリングヘッドの表面を肌に向け、肌に対して 30°の角度であてます。肌に優しく押し当て、ゆっくと上に押し上げ、肌の奥にある黒ずみや油汚れを取り除きます。
- 【クリーンモード】イオン導出 (図②)**  
ピーリングヘッドの裏面を肌に向け、肌に対して 30°の角度で置き、ゆっくと上に押し上げます。
- 【モイストモード】イオン導入 (図②)**  
ピーリングヘッドの裏面を肌に向け、肌に対して 30°の角度で肌に優しく密着させて使用します。手のパッティングのような、ゆっくととした電圧型の動きにより美容液の皮膚への浸透を促進します。
- 【リフトモード】パッティング (図②)**  
ピーリングヘッドの裏面を肌に向け、肌に対して 30°の角度で肌に優しくあてます。肌に沿ってゆっくと引き上げながら滑らせることで、肌のリフトアップ効果や引き締め効果が得られます。

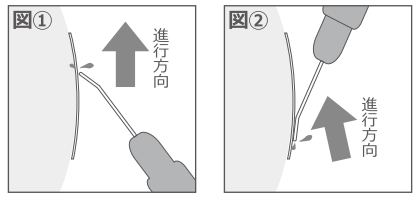

※乾いた肌に使用しないでください。クーリングモード、モイストモード、リフトモードを行う際は、美容液または化粧水を使用します。肌の奥まで浸透させるため、無添加のものをおすすめします。  
※ヒーリングヘッドに汚がついたら、その都度柔らかい布やティッシュで拭き取りとってから、ケアを続けてください。

**お手入れと保管**

- ※必ず電源スイッチを OFF にしてからお手入れしてください。
- 本体のお手入れ**  
●固形せっけんをときた水に布を湿してよくしぼり、ピーリングヘッドや本体、充電スタンドを拭き掃除してください。  
※アルコール、除光液、洗剤（ハンドソープ類）などは使わないでください。故障や部品の割れ・変色の原因になります。  
※本体にスタイリング剤、化粧品がついたままにしないでください。プラスチックが劣化して、変色やヒビが入って故障する原因になります。
  - 保管**  
●本体及び充電スタンドの電源接点をあわせて、充電スタンドに立てて保管してください。

**メモ**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**保証・修理と個人情報の取扱い**

- 保証規定**
- 保証期間内に本説明書、本体貼付ケラベル等に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず、故障した場合は、お買い上げいただいた日本国内でのみ本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。但し、消耗品及び付属品は除きます。(This warranty is valid only in Japan.)
  - 保証期間内でも次の場合は有料修理、もしくは修理不可となります。  
① 本保証書の提示がない場合、及び所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名 / 販売日の記載がない場合。  
② お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。  
③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び破損。  
④ 使用上の誤り及び不当な分解、修理、改造による故障及び破損。  
⑤ 指定外の使用、保管（電圧、周波数など）による故障及び破損。  
⑥ 一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び破損。  
⑦ ご使用による汚れ、故障及び破損。  
⑧ 修理対象商品の送料等はおお客様の負担となります。
  - 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上ご依頼ください。
  - 本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されている、お買い上げ伝票と一緒に保管して保証書に添付してください。
- 免責事項と限定保証**
- 本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
  - 付属品等は消耗品の為、保証対象外となります。
  - 本保証は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。(This warranty is valid only in Japan.)
  - 本保証は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 個人情報の取り扱い**
- お客様の個人情報は弊社商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・メール等の方法による）に利用致します。
  - 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合は除きます。  
・弊社商品の発送等に必要な個人情報。  
・法令に基づく場合。  
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

**保証書**

保証期間	お買い上げ年月日より1年間	持込
お買い上げ日:	年 月 日	
製品名:	レスカウォーターピーリング美顔器 CTR-700 / CTR701	
お客様氏名:		
ご住所:	〒	
電話番号:		
販売店名・取扱店印		
電話番号		
修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細を用意いただき、ご購入いただいた販売店までご連絡ください。		
販売元 カトレ株式会社 WWW.cattre.co.jp < ネット環境が無い場合は、下記までご連絡ください >		
カトレ株式会社 サポートセンター 〒140-0013 東京都品川区大南 6-13-3 第二新築ビル 3F	【受付時間】 土・日祝祭日以外 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 TEL:03-6423-0888 info@cattre.co.jp	

**保証書**

Resca Water peeling Scrubber

【レスカウォーターピーリング美顔器】

CTR-700 / CTR701

**取扱説明書・保証書付**

本書は製品の説明書および保証書となります。  
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。