


NiCHOICE

ピンポイントケア

取扱説明書・保証書

型番：NBT-106

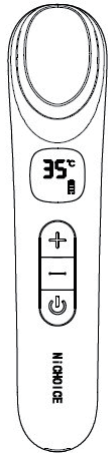

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

商品名	ピンポイントケア
型番	NBT-106
★お買い上げ	年 月 日
保証期間：本体 1 年間（お買い上げの日から）	

お客様	ふりがな	
	★お名前	様
	★ご住所 〒	—
	電話	()

販売店	★住所 店名 電話
-----	-----------

(注)
★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

宗谷株式会社
〒332-0034 埼玉県川口市中青木 1-4-22
www.nichoice.jp
お客様相談センター
TEL：048-242-3288
受付時間
平日 10：00～16：00
祝祭日および当社指定休日を除く

本書は日本国内においてのみ有効です

保証とアフタサービス

- お買い上げ日から保証期間中に取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合のみ、無料修理いたします。
 - 修理の場合は保証書をご提示ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 誤った使いかた、または自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障または損傷。
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換。
 - 火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合は、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - 本品本来の用途以外に使用された場合。
 - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

1

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示		この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
		この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
記号例		○記号は禁止(してはいけない)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は分解禁止を示します。
		●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は必ず守ることを示します。

警告

	使用中や使用後に肌に異常を感じたら、使用を中止する。 ●専門医を受診してください。
	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに使用中止する。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談センターに修理をご依頼ください。
	次のような方は使わない。 ●アレルギー体質の方、妊娠している方、肌が敏感な方は、肌のトラブルにつながる恐れがあります。
	次の部位や疾患のあるところには使用しない。 ●眼球、皮膚炎、日焼け、傷、湿しん、腫物、化膿性疾患などは、事故や肌のトラブルにつながる恐れがあります。
	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様の単独で使用させない。 ●やけどや思わぬけがを負う恐れがあります。
	腫瘍のある方、心臓ペースメーカーをお使いの方、てんかんの方、妊婦は使わない。 ●ご使用の際は医師にご相談ください。
	本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。
	使用中に痛みや不調を感じた時や、直ちに使用を中止し専門医を受診する。 ●事故や肌のトラブル、体調不良の原因となります。
	使用後は電源を必ず切る。 ●火災・感電の原因となります。

注意

	顔のケア以外の目的で使用しない。 ●事故や破損の恐れがあります。
	落としたり、ぶつかけたりしない、衝撃を与えない。 ●感電、発火の恐れがあります
	顔以外の部位や乳幼児、ベットに使わない ●肌のトラブルや故障、思わぬ事故につながる恐れがあります。
	スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料と一緒に使わない。 ●故障や肌のトラブルの原因になります
	直射日光のあたる場所や熱器具の近くに放置しない。 ●変形・変色・故障の原因になります
	洗顔料などがついたまま放置しない ●劣化や肌のトラブルの原因になります
	本体を水で洗わない、水に濡らさない。 ●本製品は防水仕様ではありません。
	ニキビ・吹き出し物のある部分に使わない。 ●肌が荒れたり傷ついたりする恐れがあります。
	シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。 ●故障、変形、変色の原因となります。

リチウムイオン電池について




本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は繰り返し充電できますが、充電回数や経年変化により性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、給電性能が落ちてきたら、新しい製品をお買い求めください。

なお使用後は家庭ゴミとして捨てず、充電式電池リサイクル協力店へご相談ください。

充電のしかた


付属の充電用 USB ケーブルを使って、マイクロ USB 部を本機の充電端子に接続して、USB 部を AC アダプターに接続してコンセントに差し込んでください。

- 充電が始まると表示部の電池残量マークが点滅します。
- 空の状態からフル充電まで約 110 分かかります
- 充電完了したら電池残量マークが点灯します
- フル充電の状態でも 40℃温熱+振動レベル中で約90分間お使いいただけます。

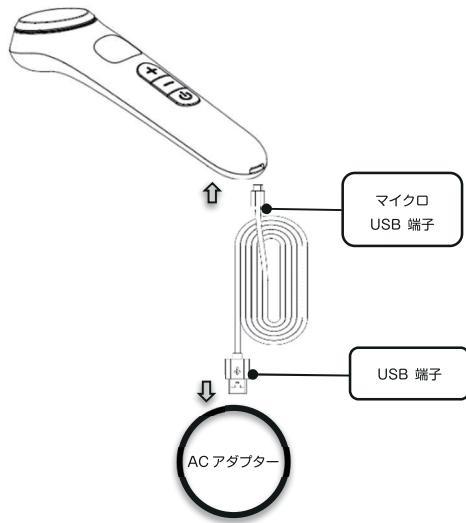

5

各部のなまえ

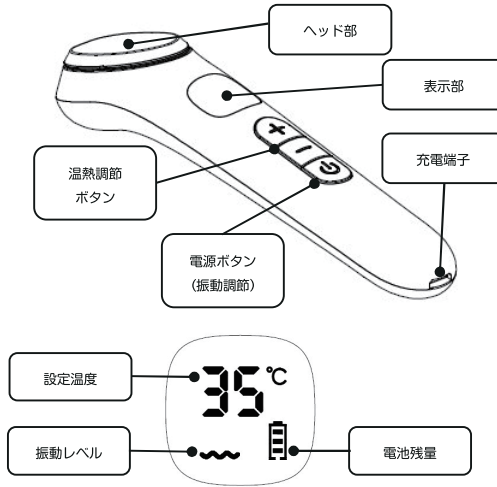

製品仕様	
電源	DC5V 200mA
消費電力	1.5W
温熱温度	35~45℃±2℃
電池	内蔵式リチウムイオン電池 350mAh
質量	約 46g(本体)
外形寸法(mm)	幅 27.5×長さ 125.5×奥行 31.5
材質	本体ABS樹脂、ヘッド部ステンレスクロムメッキ、表示部PMMA、ボタンシリコンゴム
推奨環境温度	15~35℃
付属品	充電用 USB ケーブル、保証書付取扱説明書

6

ご使用方法

- ① 電源オン：電源ボタンを押すと、表示部の画面が付き、電源オンになり、35℃温熱と弱振動で起動します。
- ② 電源オフ：作動状態で電源ボタンを 3 秒間長押しして、表示部の画面が消え、電源がオフになります。
- ③ 振動調節：電源オン状態で電源ボタンを押すごとに、振動レベルが弱→中→強→無の順番で繰り返し切り替えます、表示部のレベル表示は下記の表をご確認ください。

レベル	弱	中	強	無
表示部				


※振動無しでも電源オン状態です、使用終了の際に必ず電源オフにするようにご注意ください。

- ④ 温熱調節：温度調節の \square ボタンを押して温熱温度設定を上げます、 \square ボタンを押して温熱温度設定を下げます、調整範囲は 35~45℃。
- ⑤ オートオフ：電源オンになって最後のボタン操作から 15 分間経過すると自動で電源オフになります。


7

ご使用方法

- 顔をきれいに洗った後アイクリームや美容液などを目のまわりやほうれい線などお気になる箇所に、塗って肌を整えます。
- ヘッド部の振動と温熱で、目元、口元やホウレイ線など気になる場所に当てて一定の方向滑らせます。
- 終了する時は必ず電源を切ってください。
- 一回使用時間は 15 分間にしてください。
- 下記のイラストをご参照してお手入れをしてください。

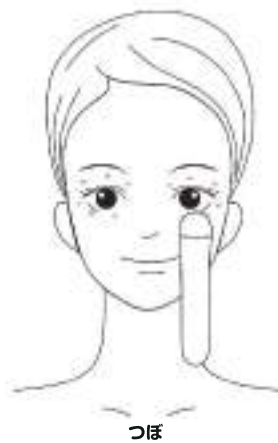

つぼ
目元のつぼにそれぞれ当てて10秒くらいキープします。

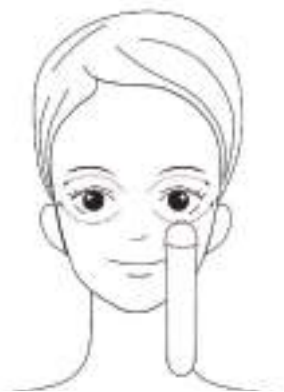

目元

目元から眉毛の上を通して髪の毛の生え際までを優しくなぞるように滑らせます
目元から目尻に移動させるように滑らせます。



ほほ

口角からほほの外側や鼻から目の下を通るラインを内から外へと滑らせます。
顎・口角：顎から口角のラインを優しく持ち上げるように滑らせます。

8

故障かなと思ったら

症状	確認事項・対策
電源が入らない	電池残量がなくなっていないですか、充電してみてください。

症状	確認事項・対策
振動と温熱が弱い	電池残量がなくなっていないですか、充電してみてください。

症状	確認事項・対策
通常と違う異音や振動または温熱がする 本体が異常に熱い 本体が変形してる	すぐに使用中止し、販売店または弊社お客様相談センターに点検・修理をご依頼ください。

9

10