

保証書

持込修理





商品名	RF光エステ美容器		
型番	NBT-218		
★お買い上げ	年	月	日
保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			

お客様	ふりがな		
	★お名前	様	
	★ご住所	〒	—
	電話	()

販売店	★住所 店名 電話
	(印)

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

宗谷株式会社

 〒332-0032 埼玉県川口市中青木1-4-22	 お客様相談センター TEL：048-242-3288
 www.nichoice.jp	 平日10：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く

本書は日本国内においてのみ有効です。


NiCHOICE

RF光エステ美容器 取扱説明書・保証書

型番：NBT-218

目次：



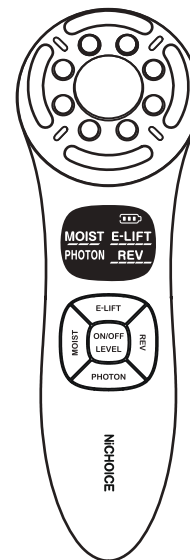


安全上のご注意.....	1
リチウム電池について.....	5
各部の名前.....	5
お使いの前に.....	6
お手入れを始めましょう.....	9
本体の動かし方.....	11
製品仕様.....	12
故障かなと思ったら.....	12
保証とアフタサービス.....	14
保証書.....	裏表紙




このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 本書記載した手順に従って、無理のないようにご使用をお願いいたします。

絵表示	 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容です」
	 警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡また重傷を負う可能性が想定される内容です。
	 注意	この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
記号例	 禁止	●記号は禁止(してはいけない)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。
	 必ず守る	●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は図の中や文章にて表示します。

危険

	下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●ペースメーカーなどの体内植え込み型医用電気機器。 ●心電針や点滴器などの装着型の医用電気機器。 ●人口心肺などの生命維持用医用電気機器。 (医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作、事項や体調不良の原因)

保証とアフタサービス

- お買上げ日から保証期間中に取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合のみ、無料修理いたします。
 - 無料修理をご依頼になる場合は、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただき、お買上げの販売店にお申し付けください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店またはお近くのお客様相談センターにご連絡ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのお客様相談センターへご連絡ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 誤った使いかた、または自己修理、分解、調整、改造などによる故障および損傷
 - お買上げ後の運送、落下などによる故障または損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合は、あるいは文字を書きかえられた場合。
(ただし、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - 本品本来の用途以外に使用された場合
 - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障および損傷
 - 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。
- 本署は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本体と充電スタンドとの角度によって充電が不安定になる	接点が汚れているのでしょうか。 ⇒本体と充電スタンドの接点に汚れなどついているかを確認しましょう。汚れが付いたら接続不良になりますので、充電が行いません。
ピリピリする、痛い	設定レベルが高い。 ⇒レベルボタンを押してレベルを下げてください
EMSが弱い感じがしない	設定レベルが低い。 ⇒EMSボタンを押してレベルを上げてください。 お肌の水分が低い、または乾燥している。 ⇒化粧水やジェルでお肌を湿らせてからご使用ください。

こんな質問	考えられる原因と処置方法
RFの熱さが強い	ヘッド部がお肌に長時間当て続けている。 ⇒RF機能ご利用中に必ず動かしながら当ててください、でないと低温やけどの恐れがあります。 動かすスピードが遅い。 ⇒少し速く動かしてください。
RFの熱さが感じない	お肌の水分が低い、または乾燥している。 ⇒化粧水やジェルでお肌を湿らせてからご使用ください。
RFでヘッド部が温まりません	RFはラジオ波の力でお肌を温めるものです、ヘッド部自身が温まりません。
化粧水やジェルは1回どれくらい使用したらよいですか	本製品の特長として、化粧水やジェルなど多く使用するほうがRFの温熱体感とEMSの刺激感をより強く得ることができます。 また、ヘッド部分にジェル大量つけると、ヘッド部の隙間に入って掃除が大変になりますので、少量ずつ追加しながらご使用ください。

警告

!	<p>下記に当てはまる方は医師と相談してご使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故やトラブルの原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている方 ・顔面の神経障害のある人 ・急性疾患、結核性疾患、発熱の方 ・血圧異常、伝染病疾患、悪性腫瘍、血液疾患、内臓疾患、糖尿病の方 ・血友病疾患の方 ・歯治療中の方 ・てんかんの方 ・敏感肌の方 ・他の疾患による皮膚異常疾患の方 ・皮膚病、アレルギー体質、アトピー性皮膚炎、皮膚トラブルの方 ・妊娠中、生理中、授乳中、催眠薬服用中の方 ・体調のすぐれない方 ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用の方
	<p>次の部位や疾患のあるところには使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故や肌のトラブルの原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・切り傷、整形手術の部位 ・骨折と整形などで金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んでいる部位 ・眼部およびまぶた、目や耳のまわり、口内粘膜、のどぼとけ ・日焼け、皮膚炎、ニキビ、吹き出し物やかゆみやほてりのある部位 ・膨らんだほくろ、ウイルス性いぼ、湿しん、腫物、化膿性疾患など ・当日の脱毛した部位。
!	<p>使用中に肌に痛みや不調を感じた時や、使用後に異常を感じたら、使用を中止して専門医に相談してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●肌のトラブルの原因となります。
	<p>本体に異音や異常や異臭が発生したら直ちに使用を中止してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故やけつのおそれがあります。 ●火災・感電の原因となります。 ●販売店または弊社お客様相談センターに修理をご依頼してください。 <p>使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故やけつのおそれがあります。

!	<p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに使用中止してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店また弊社お客様相談センターに修理をご依頼してください。
	<p>使用後は電源を必ず切ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因となります。
⊘	<p>同じ個所に当て続けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけど・低温やけどの原因となります。
	<p>本製品をご使用中は直接 LED ライトを見たり、目に照射したりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目を傷める恐れがあります。
	<p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故や破損の恐れがあります。
	<p>火中投入、ストーブ等高温になる場所で本品の使用・充電・放置しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●充電式電池を内蔵しています、発熱・発火・破裂の原因となります。
	<p>乳幼児の手の届くところに保管しない、お子様には使わせない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどや思わぬけがを負う恐れがあります。
⊘	<p>本商品は防水仕様ではありません、本体や充電スタンドに水がかからない、水場・浴室内・入浴時に使用しない、浴室や湿気の多いところで保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電、ショート、発火の原因となります。
⊘	<p>濡れた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・故障の原因となります。
⊘	<p>本体を分解、修理、改造しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電の原因となります。

⚠ 注意

⊘	<p>以下の項目は行わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・肌に発疹、炎症、かゆみなどの異常を起こしている場合は使用しない ・業務用など、過剰な連続使用をしない ・不特定多数の人が使う場所に置かない ●事故・けが・本体故障の原因となります。
---	---

製品仕様

電 源	DC5V 350mA
消費電力	1.5W
温熱温度	35~45°C±2°C
電 池	内蔵式リチウムイオン電池900mAH
質 量	本体約98g、充電スタンド約95g
外形寸法	幅50×長さ120×奥行40(mm)
材 質	<p>本体ABS樹脂と表示部はアクリル</p> <p>ボタンはシリコンゴム</p> <p>ヘッド部は表面メッキ</p>
推薦環境温度	15~30°C
付属品	<p>① 充電用USBケーブル</p> <p>② 充電スタンド</p> <p>③ 保証書付き取扱説明書</p>

故障かなと思ったらーよくあるお問い合わせ

こんな質問	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	<p>充電が切れていませんか。</p> <p>⇒充電機は特性上、電源を入れていない状態でも少しずつ自然放電し、電池切れになる場合があります。</p> <p>⇒充電スタンドで1時間くらい充電してから、再度ON/OFFボタンを押してみてください。</p>
充電ができない	<p>コンセントとケーブルは正しくつながっているか。</p> <p>⇒コンセントの差込状態、ケーブルの両端の正しくつながっているかを確認しましょう、ケーブルの差し込み場所の間違い、差し込みが不十分な状態では、充電が行われません。</p>

本体の動かし方

※お肌に当てて動かすスピードの目安は：1秒間に2cm。

※熱く感じる場合は少し早めに動かしてください。

※ヘッド部全体がお肌に触れるように使用してください。

※必ず動かしながら使用してください。一箇所に当て続けるとやけど、低温やけどの原因になります。


※まぶた、目のまわり、のどぼとけには使用しないでください。

●MOIST・PHOTONモードの動かし方

1. 矢印に沿ってお肌に軽く押し当てて動かしながら使用してください。


2. PHOTONモードはまぶた、目の周りにLED光を当ててお手入れできます。

その際に必ず目を閉じて、ヘッド部をお肌から5cm以上離して照射してください。

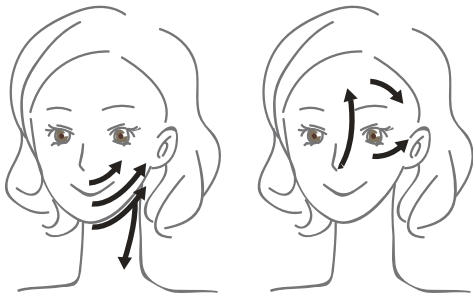

●E LIFT・REVモードの動かし方

1. 矢印に沿ってお肌に軽く押し当てて動かしながら使用してください。

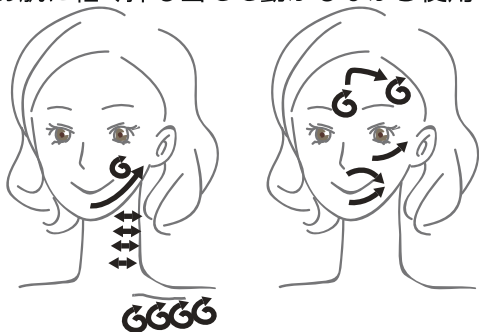

	ほかの美容器具と同時に使用しない。 ●事故やけがのおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない、不安定な場所に置かない、衝撃を与えない。 ●感電、発火の恐れがあります、事故やけが、本体が故障の原因になります。
	直射日光のあたる場所や熱器具の近くに放置しない。 ●変形・変色・故障の原因になります。
	ヘッド部を金属にあてない。 ●故障、けがの原因となります。
⊘	顔以外の部位や乳幼児に使用しない、ペットに使用しない。 ●肌のトラブルや故障、思わぬ事故につながる恐れがあります。
	本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭いたり、殺菌剤をかけたたりしない。 ●感電・発火・外観の変形と変色・本体故障の原因となります。
	ご使用前の洗顔はスクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料を使わない。 ●故障や肌のトラブルの原因になります。
	洗顔料などがついたまま放置しない。 ●劣化や肌のトラブルの原因になります
	損傷したら使用しない。 ●感電・発火・けがのおそれがあります。
	乳幼児やペットの近くで使用しない。 ●乳幼児やペットを驚かせる恐れがあります。
⊘	本品は防水仕様ではありません、本品を水洗しない、水にぬらさない。 ●感電、ショート、発火の原因となります。
!	イヤリングやネックレスなどのアクセサリー・コンタクトレンズは外して使用してください。 ●事故やけがのおそれがあります。
	使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止してください。 ●医師にご相談ください。
	ご使用の前に、ヘッドには傷がないか確認してください。 ●肌を傷つける原因となります。
	汚れた場合は、固く絞ったぬれ布巾で優しく拭いてください。

リチウムイオン電池について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は繰り返し充電できますが、充電回数や経年変化により性能が徐々に低下します。（充電回数は約300回が目安です）充電時間が長くなり、給電性能が落ちてきたら、新しい製品をお買い求めてください。




Li-ion00

なお本製品を廃棄される場合は家庭ゴミとして捨てず、自治体の分別ルールに従って廃棄し、または電池リサイクル協力店へご相談ください。


ご不明な点があればお客様相談センターまでお問い合わせください。

各部のなまえ

●本体

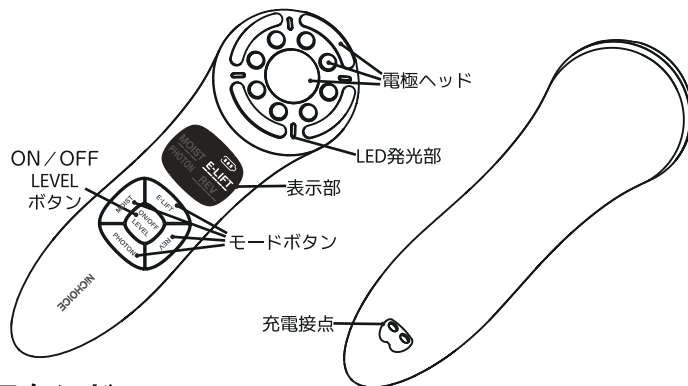

●充電スタンド

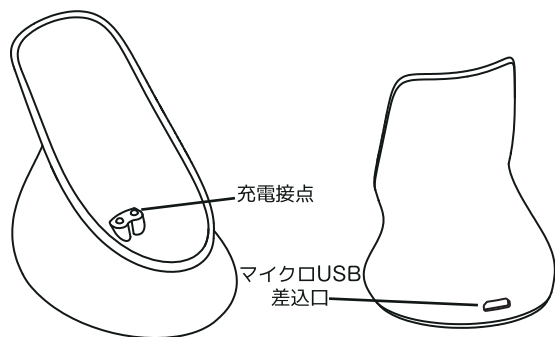

1. 腕の内側をよく洗い、水気をしっかり拭き取ります。
2. お使いのジェルまたはとろみのある化粧水などを塗ります。
3. REVモードの弱レベルから各レベルで1分間試してください。
4. 異常がないことを確認してからお手入れを行ってください。
5. 万一、皮膚に異常が見られた場合は本品を使用中止してください。

基本の使いかた

●お手入れのしかた

1. メイクを落として洗顔して、お肌を清潔な状態にする。
2. 顔に水溶性のジェルまた化粧水を塗る。
※必ず水溶性の化粧水をご使用してください。オイル系とスクラブ系は使用しないでください、肌のトラブルの原因になり、製品が故障します。
3. 電源ボタンを約3秒長押しして電源をオンにします、モードとレベルを選択する。
4. 本体をしっかり握って、次のページの「本体の動かし方」のようにお肌に充てて動かす。
5. 各モードはタイマーが設定されています、タイマー時間前にお手入れ終了する場合は本体の電源を切ってください。
6. 顔に残ったジェルや化粧水をお肌にしっかりなじませます。
7. お手持ちの適宜な乳液やクリームなどを塗布して、お肌を整える。
8. ヘッド部に残ったジェルや化粧水はティッシュなどできれいに拭き取り、箱などに入れ、ゴミやほこりがつかないように保管してください。

- 防水仕様ではないので、水洗いしないでください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤類は使用しないでください。

モード	機能	特 長	時間	レベル	お勧めの化粧品
PHOTON	RF LED	温めながらお肌に光りを当ててトリートメントします。	約3分	なし	とろみのある化粧水 またはジェル

※メモリー機能：各モードの前回選択したレベルは記憶され、次回同じ設定使用できます、モードは記憶されません。長時間使用しなかった場合や電池を使い切った場合は、メモリーはリセットされます。

お手入れを始めましょう

- ・ご使用前に下記の注意事項を改めてご確認ください。

⚠️ ご使用の注意

⊘	ご使用前またはご使用中には下記の内容を行わないでください。
	暖房器具の近くなど、高温などの場所では使用しない。
	PHOTONモード使用中は目を閉じて、LED光を直接のぞき込まない。
	防水ではありませんので、浴室内や水気の多い場所で使用しない。
!	オイル系とスクラブ系の化粧品は使用しない。
	ご使用前にまたはご使用中には下記の内容を行いません。
	ケアを行う際は必ず『水溶性』の美容液またはジェル、化粧水などをご使用してください。乾いた肌に直接に使用しますと、ヘッド部が滑りにくくなり、肌のトラブルの原因になります。(PHOTONモードのみご使用の場合は塗らなくても構いません)
	ヘッド部は肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりこすったりせず、優しく滑らせるように動かしてください。
	PHOTON以外のモードを利用する場合は、必ず動かしながら使用してください。

パッチテスト

- ・皮膚試験（パッチテスト）は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。
- ・肌のトラブルを防ぐためのテストですので、ご使用の化粧品と本体との相性チェックをお願いします。


お使いの前に

表示部の見方

●表示部とボタン



- ・電源 / LEVELボタンを約2秒間長押しして、電源をオンにします、自動的に「MOIST」モードでスタートします。

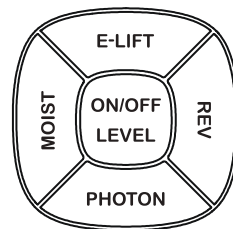

- ・モードは「MOIST」、「E LIFT」、「PHOTON」と「REV」4つあって、それぞれのボタンがあります、モードボタンを押すとそれぞれのモードに切り替えます。

- ・電源 / LEVELボタンを押して、モードレベルを選択できます。
- ・電源 / LEVEL ボタンを約2秒間長押しして、表示部の画面が消え、電源がオフになります。

●モード表示

表示部のモードは下記のように表示します。

MOIST	E - LIFT	PHOTON	REV

●レベル表示

- ・ MOIST は 3段階があります。
- ・ E-LIFT とREV は 5 段階があります。
- ・ PHOTON はレベルを表示しません、ライトの色が変わります。
- ・ レベルは下記のように表示します。

レベル1	レベル2	レベル3		
—	— —	— — —		
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
—	— —	— — —	— — — —	— — — — —

●LED表示

PHOTON モードで LEVEL ボタンを押すごとに、ヘッド部の LED が赤→黄→青→3色ミックスの順番で繰り返して切り替えます。

充電のしかた

- ・ 本製品は充電機で使用せず、充電中は使用できません。
- ・ 初めてご使用の場合は、必ず充電してから使用してください。
- ・ 長時間使用しなかった場合は必ず充電完了してから使用してください。

●充電目安

充電時間	約 2.5 時間
使用時間	約 1.5 時間


- * 充電環境は室温約 24 度において。
- * 使用時間は満充電直後から REV モード 5 レベルで使用する結果です。
- * 使用時間はモードと使用環境によって変わります。
- * 電池残量と充電環境によって充電時間が前後します。

●充電のしかた

- 1、本体をスタンドに設置します。
本体の充電端子を充電スタンドの充電端子としっかり接触するように
- 2、USB ケーブルのマイクロ端子を充電スタンドの差込口に差し込みます。
- 3、USB ケーブルの USB 端子をお手持ちの DC 5V アダプターに差し込んで、アダプターをコンセントにしっかり差し込みます。
- 4、充電完了したら、アダプターをコンセントから抜いてください。

●充電の表示

- 1、充電中は電池マークが点滅します。
- 2、充電完了したら、電池マークが点灯します。

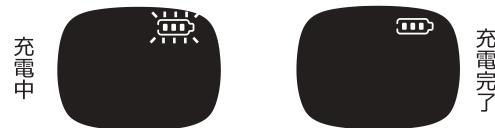

モードについて

モード	機能	特長	時間	レベル	お勧めの化粧品
MOIST	RF 振動	お肌の角質層まで温めながら、美容成分をお肌の角質層まで浸透させます、みずみずしいお肌に導きます。	約 3 分	振動： 3 段階	とろみのある化粧水、シートマスク
E-LIFT	RF EMS	温めながら、筋肉を刺激し、ハリのあるお肌を整えます。※首と肩にもご使用になれます。	約 5 分	EMS： 5 段階	とろみのある化粧水 またはジェル
REV	RF EMS 振動	MOISTとE-LIFTとのミックスモードで、短時間でリトメントできます。	約 5 分	EMS： 5 段階	とろみのある化粧水 またはジェル