

# 保証書

持込修理

商品名	ポーテシルエットRF美容器	★お買い上げ	年 月 日
型番	NBT-951	保証期間	本体1年間

(お買い上げの日から)

お客様様	ふりがな
	★お名前 様
	★ご住所 〒 -
電話 ( )	

販売店	★住所 店名 電話
-----	-----------

印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

## 宗谷株式会社



〒332-0032  
埼玉県川口市中青木1-4-22



お客様相談センター  
TEL：048-242-3288



www.nichoice.jp



平日10：00～16：00  
祝祭日および当社指定休日を除く


本書は日本国内においてのみ有効です。

# NiCHOICE

## 取扱説明書・保証書

ポーテシルエットRF美容器

NBT-951

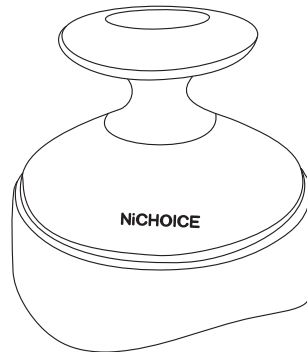

### もくじ






安全上のご注意.....	1
リチウム電池について.....	5
各部の名前.....	6
お使いの前に.....	7
使いかた.....	13
使い終わったら.....	17
製品仕様.....	19
故障かなと思ったら.....	20
保証とアフタサービス.....	22
保証書 .....	裏表紙

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 本書記載した手順に従って、無理のないようにご使用をお願いいたします。

絵 表 示	 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容です」
	 警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡また重傷を負う可能性が想定される内容です。
	 注意	この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
記 号 例	 禁止	●記号は禁止(してはいけない)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。
	 必ず守る	●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は図の中や文章にて表示します。

## 危険

下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。



- ベースメーカーなどの体内植え込み型医用電気機器。
- 心電針や点滴器などの装着型の医用電気機器。
- 人口心肺などの生命維持用医用電気機器。

(医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作、事項や体調不良の原因)

## 保証とアフタサービス

1. お買上げ日から保証期間中に取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合のみ、無料修理いたします。
  - 無料修理をご依頼になる場合は、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただき、お買上げの販売店にお申し付けください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店またはお近くのお客様相談センターにご連絡ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのお客様相談センターへご連絡ください。
4. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - 誤った使いかた、または自己修理、分解、調整、改造などによる故障および損傷
  - お買上げ後の運送、落下などによる故障または損傷
  - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - 火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
  - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合は、あるいは文字を書きかえられた場合。  
(ただし、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - 本品本来の用途以外に使用された場合
  - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障および損傷
  - 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。
5. 本署は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

## 故障かなと思ったらーよくあるお問い合わせ

こんな質問	考えられる原因と処置方法
RFの熱さが強い	<p>ヘッド部がお肌に長時間当て続けている。</p> <p>⇒RF機能ご利用中に必ず動かしながら当ててください、でないと低温やけどの恐れがあります。</p> <p>動かすスピードが遅い。</p> <p>⇒少し速く動かしてください。</p>
RFの熱さを感じない	<p>お肌の水分が低い、または乾燥している。</p> <p>⇒化粧水やジェルでお肌を湿らせてからご使用ください。</p>
RFでヘッド部が温まりません	<p>RFはラジオ波の力でお肌を温めるものです、ヘッド部自身が温まりません。</p>
化粧水やジェルは1回どれくらい使用したらよいですか	<p>本製品の特長として、化粧水やジェルなど多く使用するほうがRFの温熱体感とEMSの刺激感をより強く得ることができます。</p> <p>また、ヘッド部分にジェル大量つけると、ヘッド部の隙間に入って掃除が大変になりますので、少量ずつ追加しながらご使用ください。</p>

## 警告

下記に当てはまる方は医師と相談してご使用してください。

- 事故やトラブルの原因となります。
- ・医師の治療を受けている方
- ・顔面の神経障害のある人・敏感肌の方
- ・皮膚病、アレルギー体質、アトピー性皮膚炎、皮膚トラブルの方
- ・歯治療中の方・てんかんの方・他の疾患による皮膚異常疾患の方
- ・急性疾患、結核性疾患、発熱の方
- ・血友病疾患の方・血圧異常、伝染病疾患、悪性腫瘍、血液疾患、内蔵疾患、糖尿病の方
- ・妊娠中、生理中、授乳中、催眠薬服用中の方
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用の方
- ・体調のすぐれない方

次の部位や疾患のあるところには使用しないでください。

- 事故や肌のトラブルの原因になります。
- ・切り傷、整形手術の部位・当日の脱毛した部位。
- ・骨折と整形などで金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んでいる部位
- ・眼部およびまぶた、目や耳のまわり、口内粘膜、のどぼとけ
- ・日焼け、皮膚炎、ニキビ、吹き出し物やかゆみやほてりのある部位
- ・膨らんだほくろ、ウィルス性いぼ、湿しん、腫物、化膿性疾患など

使用中に肌に痛みや不調を感じた時や、使用後に異常を感じたら、使用を中止して専門医に相談してください。

- 肌のトラブルの原因になります。

使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守ってください。

- 事故やけがのおそれがあります。

本体に異音や異常や異臭が発生したら直ちに使用を中止してください。

- 事故ややけどのおそれがあります。
- 火災・感電の原因となります。
- 販売店また弊社お客様相談センターに修理をご依頼してください。

使用後は電源を必ず切ってください。

- 火災・感電の原因になります。

## 警告



万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに使用中止してください。

- 火災・感電の原因となります。
- 煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談センターに修理をご依頼してください。



- 同じ個所に当て続けたい。
- やけど・低温やけどの原因になります。



本商品は防水仕様ではありません、本体や充電スタンドに水がかからない、水場・浴室内・入浴時に使用しない、本品を水洗しない、水にぬらさない。浴室や湿気の多い場所で保管しない。

- 感電、ショート、発火の原因となります



濡れた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。

- 感電・ショート・故障の原因になります



本製品をご使用中は直接 LED ライトを見たり、目に照射したりしない。

- 目を傷める恐れがあります。



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

- 事故や破損の恐れがあります。



火中投入、ストーブ等高温になる場所で本品の使用・充電・放置しない。

- 充電式電池を内蔵しています、発熱・発火・破裂の原因となります。



乳幼児の手の届くところに保管しない、お子様には使わせない。

- やけどや思わぬけがを負う恐れがあります。



本体を分解、修理、改造しない。

- 感電の原因となります。

## 注意



使用に適さない化粧品と水以外使用しない。

肌トラブル、故障の原因となります。

- ・仕様に適さない化粧品：オイル、スクラブ系、刺激の強い化粧水、ボディソープ
- ・お薦めの化粧品：温感効果のある化粧水、マッサージジェル、脂肪燃焼成分を含む化粧水等

## 故障かなと思ったらーよくあるお問い合わせ

こんな質問	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	充電が切れていませんか。 ⇒充電池は特性上、電源を入れていない状態でも少しずつ自然放電し、電池切れになる場合があります。 ⇒充電台で1時間くらい充電してから、再度ON/OFFボタンを押してみてください。
本体と充電台との角度によって充電が不安定になる	接点が汚れているのでしょうか。 ⇒本体と充電スタンドの接点に汚れなどついているかを確認しましょう、汚れが付いたら接続不良になりますので、充電が行いません。
ピリピリする、痛い	設定レベルが高い。 ⇒レベルボタンを押してレベルを下げてください。
EMS が弱い感じがしない	設定レベルが低い。 ⇒EMSボタンを押してレベルを上げてください。 お肌の水分が低い、または乾燥している。 ⇒化粧水やジェルでお肌を湿らせてからご使用ください。

## 製品仕様

入力電源	DC5V 350mA
消費電力	1.5W
電池	内蔵式リチウムイオン電池1000mAH
質量	本体約195g、充電台約65g
外形寸法	幅108×奥行90×高さ88(mm)
材質	ABS樹脂(本体)、PMMA(表示部) シリコンゴム(ボタン) クロムメッキ(ヘッド部)
推薦環境温度	15～30℃
付属品	① 充電用USBケーブル ② 充電台 ③ 保証書付き取扱説明書

## ⚠ 注意

以下の項目は行わない。

- ・肌に発疹、炎症、かゆみなどの異常を起こしている場合は使用しない
- ・業務用など、過剰な連続使用をしない
- ・不特定多数の人が使う場所に置かない
- 事故・けが・本体故障の原因となります

ほかの美容器具と同時に使用しない。

- 事故やけがのおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりしない、不安定な場所に置かない、衝撃与えない。

- 感電、発火の恐れがあります、事故やけが、本体が故障する原因になります。

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤では拭いたり、殺菌剤をかけたりしない。

- 感電・発火・外観の変形と変色・本体故障の原因となります。

イヤリングやネックレスなどのアクセサリー・コンタクトレンズは外して使用してください。

- 事故やけがのおそれがあります。

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに放置しない。

- 変形・変色・故障の原因になります。

ヘッド部を金属にあてない。

- 故障、けがの原因となります。

顔以外の部位や乳幼児に使用しない、ペットに使用しない。

- 肌のトラブルや故障、思わぬ事故につながる恐れがあります。

洗顔料などがついたまま放置しない。

- 劣化や肌のトラブルの原因になります。汚れた場合は、固く絞ったぬれ布巾で優しく拭いてください。

損傷したら使用しない。

- 感電・発火・けがのおそれがあります。

乳幼児やペットの近くで使用しない。

- 乳幼児やペットを驚かせる恐れがあります。

使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止してください。

- 医師にご相談ください。

## リチウムイオン電池について



Li-ion00

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は繰り返し充電できますが、充電回数や経年変化により性能が徐々に低下します。（充電回数は約 300 回が目安です）充電時間が長くなり、給電性能が落ちてきたら、新しい製品をお買い求めてください。

なお本製品を廃棄される場合は家庭ゴミとして捨てず、自治体の分別ルールに従って廃棄し、または電池リサイクル協力店へご相談ください。

ご不明な点があればお客様相談センターまでお問い合わせください。

## 使い終わったら

### 保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを充電台や壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストープやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

### 保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.21～P.22)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンターまでご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

### お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様相談センターまでお問い合わせください。



お客様相談センター  
TEL : 048-242-3288



平日10:00～16:00  
祝祭日および当社指定休日を除く

## 使い終わったら

### ●お手入れのしかた

ヘッド面は、毎回使用後必ずお手入れをしてください。

製品の故障・動作不良を防ぐために、定期的にお手入れをしてください。

お手入れする際は必ず電源をオフにし、ACアダプターを充電台とコンセントから抜いてください。

### ●本体のお手入れ

ヘッド面についた水滴や化粧水、ジェルなどを拭き取る。

水で濡らして硬くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る。

※ 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。

※ アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。




充電端子についた水滴や汚れを拭き取る。

※ 直射日光には当てないでください。


※ 本体がぬれた状態のまま、充電しないでください。

## 各部のなまえ

### ●本体

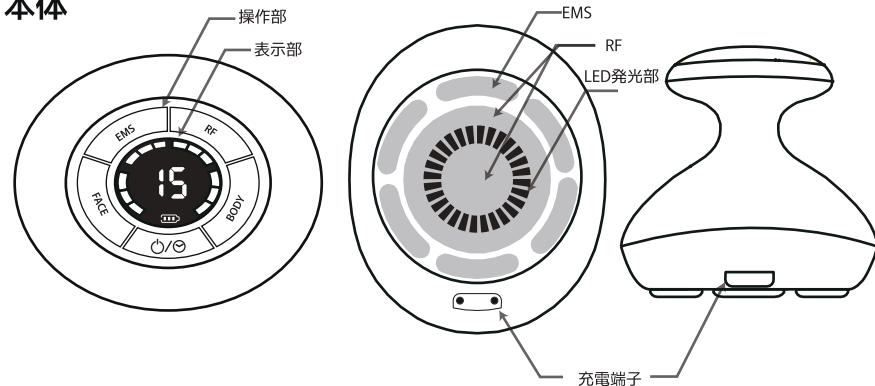


### ●充電台

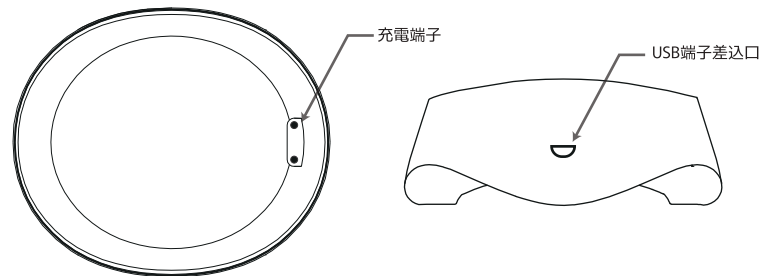

### ●付属品

充電USBケーブル

## お使いの前に

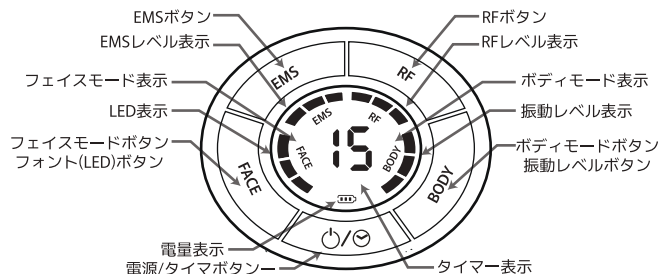

ボタン	機能	ランプ表示
	電源をオン/オフします (1秒以上長押し) 電源がオンの時、タイマーを設定します	選択前にモードランプが点滅
	電源がオンの時、フェイスモードを選択します フェイスモード作動時、LEDの色を選択します	選択したモードのランプが点灯 詳細はP8~9のレベルについて参照
	電源がオンの時、ボディモードを選択します ボディモード作動時、振動のレベルを調整します	
	EMS機能のレベルを調整します	詳細はP8~9のレベルについて参照
	RF機能のレベルを調整します	


## 使いかた

### ●フェイスモードの使い方



注意

- 顔全般使用時間は10分以上超えないでください。
- 右図の示すようにまぶた、目の周り、のどぼとけ、花、耳、額に使用しないでください。
- 適さない化粧品(P12)を使用しないでください。
- 適した化粧品又は水を使用しないと肌トラブル、故障の原因となります。

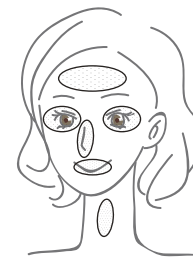

※ご使用前に洗顔してメイクや汚れをしっかりと取り、お肌を清潔な状態にしてください。



- ① 顔の使用する部分に化粧品、または水をつける。
- ② 電源ボタンを長押しして、フェイスモードボタンでフェイスモードを選択する。
- ③ お好みに合わせて、RFとEMSのレベルボタンでレベルを調整する、フェイスモードボタンでフロント色を選択する。
- ④ 矢印の方向でお肌の上を動かす、顔全体10分以内にしてください。1秒間に約2~5cmの目安で動かす。
- ⑤ ケアが終わったら、電源ボタンを長押しして、電源をオフにする。  
(タイマーから切れたら電源が自動的にオフになる)






## 使いかた

### ●太もも(各脚5分)

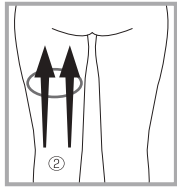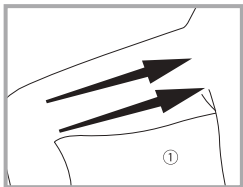


- ①太もも内側部分を膝から脚の付け根に向かって動かす。
- ②太もも裏側を、膝から脚の付け根に向かって動かす。
- ③反対側の脚に変えて①と②を繰り返す。


### ●ウエスト

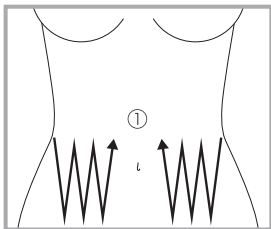


- ①お腹の外側から内側へ向かって、「W」字のような動きで動かす。(5分)
- ②脇腹から脚の付け根に向かって動かす。(3分)
- ③へその周りを動かす。(2分)

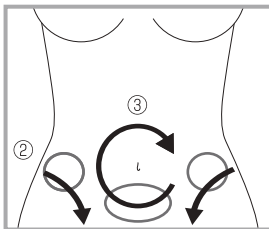

### ●ヒップ

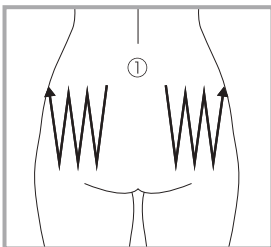

- ①お尻の内側外側に向かって、「W」字のような動きで動かす。(5分)
- ②内側から外側にに向かって動かす。(3分)
- ③中心部は太ももの付け根に向かって下から上に動かす(2分)

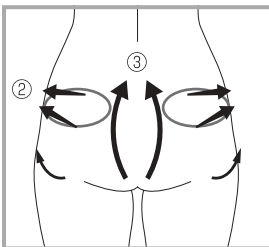

## お使いの前に


### ●モードとタイマーについて



- ①電源を入れると、2つモードのランプが点滅します。
  - ②モードを選択すると、ランプが点灯します。
- ※電源オン時に電源ボタンでタイマーを1~15分設定できます。

### ●レベルについて

【RFのレベル】(フェイスモードとボディモードの使いかたが同じ)  
RFボタンを押すとRFレベルは下記の順番で変わり、RFレベルランプの点灯でレベルを表示します。

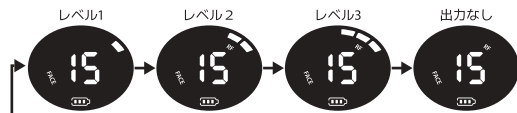

※使い初めや、慣れるまではレベル1からご使用ください。  
レベルを上げると、温度が高く感じます。使用部位が甚割暖かく感じるほどが使用の目安です。

【EMSのレベル】(フェイスモードとボディモードの使いかたが同じ)  
EMSボタンを押すとEMSレベルは下記の順番で変わり、EMSレベルランプの点灯点滅でレベルを表示します。



レベルを上げると、刺激が強く感じられます。心地よいと感じるレベルに設定してください。 ※は点滅を表します。  
※ピリピリとした痛みを感じるほどレベルを上げないでください。  
※肌についている美容液の量によって体感が変わる場合があります。


【LEDの調整】(フェイスモードのみ)  
フェイスモードでフェイスモードボタンを押すとLEDは次のように色が変わります。



## お使いの前に

【振動のレベル】（ボディモードのみ）

ボディモードでボディモードボタンを押すとLEDは下記の順番で変わり、ランプでレベルを表示します。

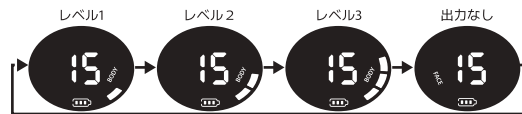

## 充電のしかた

- ・本製品は充電電池で使用します、充電中は使用できません。
- ・初めてご使用の場合は、必ず充電してから使用してください。
- ・長時間使用しなかった場合は必ず充電完了してから使用してください。

### ●充電目安

充電時間	約 3 時間
使用時間	約 1.5 時間


- \* 充電時間は室温約 24 度の環境で確認した結果です
- \* 使用時間は満充電直後から REV モード 5 レベルで使用する結果です。
- \* 使用時間はモードと使用環境によって変わります。
- \* 電池残量と充電環境によって充電時間が前後します。

### ●充電のしかた

1. 本体をスタンドに設置します。

本体の充電端子を充電スタンドの充電端子としっかり接触するようにセットしてください。

※充電前に充電端子を水や美容液等ないようにきれいに拭き取りしてください。

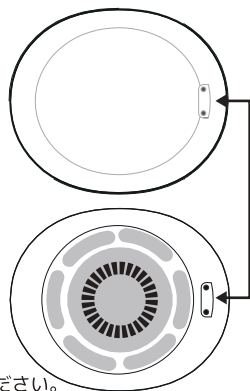


## 使いかた

### お体の各部位のおすすめ使い方


○ EMSの刺激を感じやすい部位 → 動かす方向

#### ●二の腕（各腕 5 分）

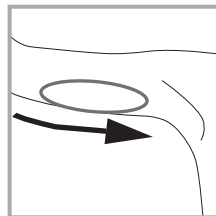


- ①手を上にあげて、腕をまっすぐ伸ばす。  
二の腕の期になる部分が下になるようにする。
- ②ひじからワキに向かって動かす。  
二の腕の内側と外側とも行います。
- ③反対側の腕に変えて①と②を繰り返す。

#### ●バスト

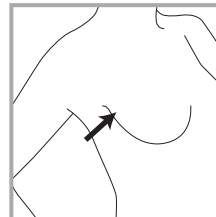

- ①肩甲骨からバストのトップ、デコルテに向かって動かす。  
または肩甲骨の下あたりから動かす。（5分）

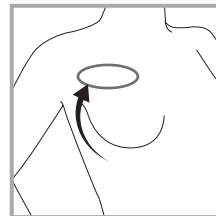


- ②片手でバストを支えながら（キープ）、バストワキからバストを持ち上げるように動かす。（5分）  
※心臓の真上（みぞおち周り）には使用しないでください。

- ③反対側のバストに変えて①と②を繰り返す。

## 使いかた

### ●ボディモードの使い方

- ①使用したい部位に化粧品（10円程度）をお肌に馴染ませる、または水でたっぷりぬらす。
- ②電源ボタンを長押しして、電源をオンにする。
- ③お好みに合わせて、RF(ラジオ波・温め)レベルボタン、EMS(筋肉刺激)レベルボタン、振動レベルボタン(ボディモードボタン)押ししてレベルを調整する。  
※使い初めは必ずレベル1から始めてください。  
※EMS使用時はピリピリとした痛みを感じるほど、レベルを上げないでください。
- ④お肌の上を1秒間に約2～5cmの目安で動かしながら使用する。  
※お肌に全面当てるように、必ず下図のように、垂直に当ててください。  
傾けて使用すると、体感が感じにくくなり、肌トラブルの原因となります。

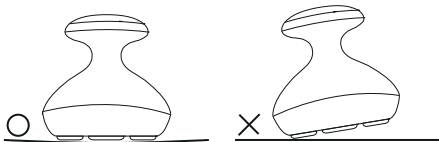

- ⑤ケアが終わったら、電源ボタンを長押しして、電源をオフにする。




本商品は防水仕様ではありません、本体や充電スタンドに水がかからない、水場・浴室内・入浴時に使用しない、本品を水洗しない、水にぬらさない。浴室や湿気の多い場所で保管しない。

●感電、ショート、発火の原因となります

## 充電のしかた

2. USBケーブルのマイクロ端子を充電スタンドの差込口に差し込みます。
3. USBケーブルのUSB端子をお手持ちのDC 5Vアダプターに差し込んで、アダプターをコンセントにしっかり差し込みます。  
※環境配慮のためアダプターを付属しません。  
※お手持ちのアダプターの電圧を必ずご確認ください。
4. 充電完了したら、アダプターをコンセントから抜いてください。

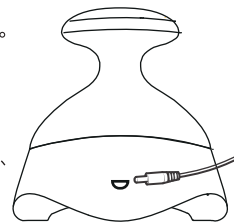

### ●充電の表示

1. 充電中は電量マークが点滅します。
2. 充電完了したら、電量マークが点灯します。



充電中ランプ点滅




充電完了ランプ点灯

### ●充電できない場合

本体を充電台に設置しても充電がしない場合は下記の方法をお試しください。

- ① 充電台のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグをしっかりと奥まで差し込んでください。
- ② 本体と充電台の充電端子が正しく接触していない可能性があります。本体を充電台から取り外し、再度設置しなおしてください。表示部の電量ランプが点滅しない場合は、本体を前後左右に動かして、本体と充電端子が接触するように設置してください。

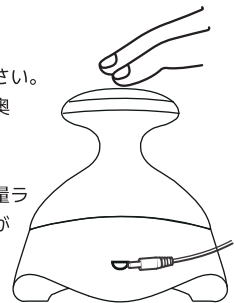

## パッチテスト

※皮膚試験（パッチテスト）は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

※肌のトラブルを防ぐためのテストですので、ご使用の化粧品と本体との相性チェックをお願いします。

1. 腕の内側をよく洗い、水気をしっかり拭き取ります。
2. お使いのジェルまたはとろみのある化粧水などを塗ります。
3. REVモードの弱レベルから各レベルで1分間試してください。
4. 24時間以内にお肌に異常がないことを確認してから使用してください。
5. 万一、皮膚に異常が見られた場合は本品を使用中止してください。

## 各機能特長

本製品は、RF(ラジオ波)でお肌を温め、EMSと振動で筋肉を刺激してケアをする家庭用美容器です。ご自身のお肌の状況や目的に合わせて各機能を組み合わせてケアすることができます。

- RF（ラジオ波）  
使用部位を素早く温めることができます。  
お肌を温めることで、ケアに適した状態にすることができます。
- EMS（筋肉刺激）  
外部から電気刺激を与えて、筋肉を動かすケアです。
- 振動  
MAX12,000回/分振動でケアに適した状態にすることができます。
- フォント（LED）  
4色のLED光が肌の調子を整えます。  
赤色：活性、青色：抑制、黄色：再生、ピンク（赤と青）：複合

## モードについて

モード	機能	使用頻度
フェイス	RF（ラジオ）、EMS（筋肉刺激）、フォント(LED)	全身で1回30分以内 1部位につき10分程度 1部位につき週に2~3回 ※あくまでも目安となります。 使用状況を見ながら毎日使用しても構いません。
ボディ	RF（ラジオ）、EMS（筋肉刺激）、振動	

※1部位＝ひじ上、ひじ下、ふくらはぎ、太もも、腹部前側、腹部後側、ヒップ、顔など  
※過度な使用、1ヶ所へ集中しよう、レベルお上げすぎなどはオーバークアとなり、お肌を傷める原因となります。

※同じ部位に使用する場合は、最低5時間程度の間をあけてください。

※使用時に、1ヶ所に止めずに、必ずお肌の上で動かしながら使用してください。

- お肌の状態と化粧品について  
必ず化粧品・水をお肌に塗ってから本製品をご使用ください。  
何も塗らずに使用したら、体感や効果を感じにくく、また肌トラブルの原因になります。

- ⚠●使用に適さない化粧品  
オイル系、スクラブ系、刺激の強い化粧品、ボディソープ  
温感効果のある化粧水、マッサージジェル  
脂肪燃焼成分を含む化粧水、マッサージジェル等